

# VITAMMY®

## Infant



### POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

⚠ Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.

## ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali našu digitálnu detskú váhu. Pred prvým použitím prístroja si prečítajte návod na obsluhu a upozornenia. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom, aby ste predišli nehodám a/alebo poškodeniu produktu pri jeho používaní.

Toto elektronické zariadenie je domáce zariadenie na kontrolu hmotnosti dieťaťa, užitočné najmä pri vážení dojčiat a predčasne narodených detí. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby bol výrobok tej najvyššej kvality, pohodlný pre bábätká, jednoduché použitie a bezpečný pri vážení.

## POPIS ZARIADENIA



1. Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť / Tare
2. Tlačidlo zmeny jednotky UNIT
3. LCD obrazovka
4. Výsledok váženia
5. Vybraná jednotka hmotnosti (kg / lb / st / g)

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

⚠ Pred prvým použitím vložte batérie.


1. Otvorte kryt batérie a vyberte izolátor z priehradky na batérie.
2. Vložte 2 batérie AAA (1,5 V) v súlade s vyznačenou polaritou.
3. Zatvorte kryt batérie.

### VÁŽENIE

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a rovný povrch.

⚠ Váhu neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú podložky alebo koberce, pretože to môže ovplyvniť výsledok merania.

2. Váhu zapnite tlačidlom Zapnúť(ON) / Vypnúť (OFF) / Tare. Na obrazovke sa zobrazí „Hi“.
  3. Keď sa na obrazovke objavia iba nuly a jednotka váženia, možno spustiť kontrolné váženie.
  4. Ak chcete zmeniť jednotku hmotnosti, stlačte tlačidlo (kg / lb / st / g) UNIT
  5. Položte dieťa na váhu, výsledok sa zobrazí na displeji. Ak nechcete dieťa položiť priamo na váhu, najprv položte na váhu uterák, stlačte tlačidlo. ON / OFF / Tare, pre resetovanie hmotnosti potom dieťa položte na váhu.
  6. Vypnite váhu stlačením tlačidla ON / OFF / Tare, alebo počkajte, kým sa váha po 30 sekundách nevypne.
- ⚠ Ak chcete vykonať ďalšie váženie, po zložení dieťaťa z váhy vynulujte váhu pred ďalším vážením stlačením tlačidla ON / OFF / Tare.

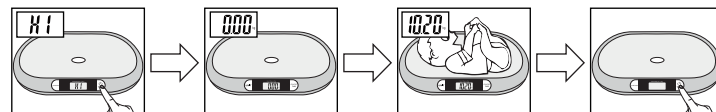


## FUNKCIA AUTOLOCK

Keď dieťaťko leží na váhe a je stále v pohybe, váha sa po trojitom zablikaní na displeji automaticky stabilizuje a zobrazí výsledok.


## TARE

Aj ďalšie deti môžete vážiť na váhe VITAMMY INFANT. Pred ďalším vážením odoberte dieťa z váhy, stlačte tlačidlo ON / OFF / Tare, ktoré resetujú (vynulujú) váhu, a potom naň položte ďalšie dieťa.

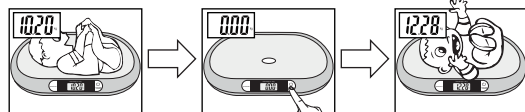


## ZMENA JEDNOTKY HMOTNOSTI

Ak chcete zmeniť jednotku hmotnosti (kg / lb / st / g), stlačte tlačidlo UNIT

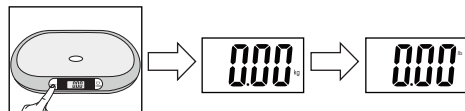


## INDIKÁTOR PRESAHUJÚCI LIMIT

Ak hmotnosť dieťaťa presiahne maximum pre túto váhu (20 kg), na displeji sa zobrazí „0-Ld“.

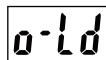

## NÍZKY STAV BATÉRIE

Váha signalizuje nízky stav batérie zobrazením symbolu „Lo“ na obrazovke.

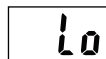

## UPOZORNENIA

- ⚠ Pri používaní by mala byť váha umiestnená na rovnom, suchom, stabilnom a tvrdom povrchu.
- ⚠ Tento spotrebič používajte doma podľa určenia.
- ⚠ Váhu nepreťažujte, maximálna nosnosť je 20 kg.
- ⚠ Vyhňte sa otrasom alebo nárazom do váhy.
- ⚠ Neponárajte do vody.
- ⚠ Pri skladovaní na váhu nič nekladte.
- ⚠ Optimálna teplota na manipuláciu a skladovanie je medzi 5 a 30 °C.
- ⚠ Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.

## SPECIFIKÁCIA

⚠ Akékoľvek úpravy na zariadení nie sú povolené

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MODEL                         | SBS-30860                                                                |
| VÁHY                          | 1600 g                                                                   |
| TYP ZOBRAZENIA                | LCD 60 × 21 mm                                                           |
| ROZMERY                       | 550 × 330 × 27 mm                                                        |
| OBSAH BALENIA                 | Váha, manuál, 2 batérie AAA 1,5V                                         |
| PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY         | Teplota: 5–40 ° C;<br>Vlhkosť: 15–93 %;<br>Atmosférický tlak: 70–106 kPa |
| PODMIENKY SKLADOVANIA DOPRAVA | Teplota: -25-70 °C<br>Vlhkosť: ≤93 %; Atmosférický tlak: 70–106 kPa      |
| SNÍMAČE                       | 4 presné snímače                                                         |
| MAXIMÁLNE ZATAŽENIE           | zaťaženie 20kg                                                           |
| PRESNOSŤ                      | 0,01 kg                                                                  |
| NAPÁJANIE                     | 2 batérie AAA 1,5V                                                       |

## ZÁRUKA

ZARIADENIE: VITAMMY infant (model SBS-30860)

RUČITEĽ: MLongauer, s.r.o. Farská 12, 949 01, Nitra

Prevádzka: Baby's, Hlavná 43, 951 53 Babindol

TECHNICKÁ PODPORA: TEL. +421940404831

E-MAIL: reklamacie@mlongauer.sk

**ZÁRUKA:** Ručiteľ ubezpečuje kupujúceho, že zariadenie VITAMMY, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s vysokými štandardmi kvality a dobrej kvality zariadenia, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli brániť jeho správnej funkcii. V prípade závad, poškodení a závad odhalených počas tejto záručnej doby, garant bezplatne a v čo najkratšom čase, maximálne do 30 dní, opraví alebo vymení nové zariadenie.

**TYP ZÁRUKY:** Táto záruka predpokladá, že reklamované zariadenie bude dodané do servisu na náklady Kupujúceho, bezplatne opravené a bezplatne dodané späť kupujúcemu.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 24 mesiacov.

Bez záruky na diely a príslušenstvo podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní: batérie

**ZÁRUČNÁ LEHOTA:** Záruka je platná odo dňa nákupu potvrdeného dokladom kúpe, ktorý musí byť priložený k záručnému listu.

**OBĽASŤ ZÁRUKY:** Táto záruka platí na území Slovenska.

**POSTUP V PRÍPADE PORUCHY VÝROBKU:**

Pre využitie záruky kontaktujte technickú podporu do 14 dní od zistenia závady,

za účelom získania pomoci a v prípade potreby začatia reklamačného konania.

V rámci reklamačného konania je potrebné reklamované zariadenie zaslať na adresu servisného strediska s priložením tohto záručného listu a dokladu o kúpe.

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY:**

Aby záruka zostala v platnosti, je potrebné spolu s reklamovaným zariadením odovzdať tento záručný list (správne vyplnený a podpísaný) a doklad o kúpe s dátumom nákupu spolu s názvom zakúpeného zariadenia.

**OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZÁRUK:**

- \* Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo zariadeniam, keď zariadenie nefunguje alebo nebolo v prevádzke.
- \* Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, ako aj na vady a poškodenia vyplývajúce z:
  - \* nevhodného používania (v rozpore s určeným použitím) alebo používania spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie
  - \* nesprávnou manipuláciou alebo manipuláciou v rozpore s pokynmi na skladovanie a údržbu (napr. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodného spotrebného materiálu
  - \* neoprávnené zásahy servisu, neoprávnené opravy, zmeny a konštrukčné zmeny
  - \* vonkajšie príčiny (atmosférické javy, nesprávne napájanie atď.)
- \* Záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku v dôsledku zmien vlastností (zhoršenie kvality) prvkov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.
- \* Záručné opravy nezahŕňajú činnosti súvisiace s údržbou a čistením zariadenia popísané v Návode na obsluhu.

Pečiatka a podpis

dodávateľa/zákazníka

Dátum

Podpis

## LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA DOMÁCIMI UŽÍVATEĽMI EURÓPSKEJ ÚNIE



Prítomnosť tohto symbolu na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt nemožno likvidovať rovnakým spôsobom ako domáci odpad. Zodpovedáte preto za likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a ste povinní ich odovzdať do autorizovaného recyklačného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení. Triedenie, likvidácia a recyklácia uvedených zariadení prispieje k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečí, aby recyklácia prebiehala v súlade so zásadami rešpektovania ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o zberných miestach pre vaše elektrické a elektronické zariadenia vám poskytne miestny úrad alebo miestna služba likvidácie domového odpadu.

Výrobok je certifikovaný CE



## KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

### VROBCA:

 AEAMAXXCO., LTD

4F, BuildingA, Donghu Industrial Park, No61, DongpuEr Road, Tianhe District, Guangzhou,  
Čínska ľudová republika

### DISTRIBÚTOR:

MLongauer, s.r.o. Farská 12, 949 01, Nitra

Prevádzka: Baby's, Hlavná 43, 951 53 Babindol

Vyrobené v Číne / Made inChina

Verzia manuálu: 01.06 / 14.05.2021