

RevivaEye kolagénové očné náplasti

120mm

JOVS

RevivaEye kolagénové
očné náplasti

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

Pre zaistenie bezpečného používania tohto výrobku si prosím starostlivo prečítajte návod na použitie a riadte sa pokynmi tu uvedenými.

- Nebezpečenstvo**
Môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.
- Varovanie**
Môže spôsobiť vážne zranenie.
- Upozornenie**
Môže spôsobiť drobné zranenia alebo škody na majetku.



- Nebezpečenstvo**
 - Používatelia, ktorí používajú elektronické zdravotnícke prístroje, ako sú kardiostimulátory, EKG skenery, prístroje na meranie srdcového tepu, infúzne pumpy atď., by tento výrobok nemali používať, pretože by mohol spôsobiť poruchy zdravotníckych zariadení a viesť k neprijemným pocitom alebo úrazom.
 - Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou. Zariadenie a napájací zdroj udržiajte vždy suché.
 - Nepoužívajte výrobok v blízkosti kachlí alebo klimatizačných jednotiek, aby ste predišli nehodám a poruchám výrobku.
 - Nepoužívajte výrobok v korozívnom prostredí, aby ste predišli nehodám a poruchám výrobku.
 - Uchovávajte výrobok mimo dosahu dočiat a malých detí.
 - Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla, aby ste predišli nehodám.
 - Ak je batéria poškodená, výrobok nepoužívajte, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným nehodám.
 - Tento výrobok nie je vodotesný. Neponárajte ho do vody, aby ste predišli poruche alebo nehodám. Ak sa výrobok dostane do kontaktu s vodou, znova ho nepoužívajte.

- Varovanie:**
 - Aby ste zaistili správnu funkciu výrobku, nerozoberajte ho, neupravujte ho ani ho neupravujte sami.

01

- Osoby nižšie uvedené by tento výrobok nemali používať:**
- Osoby mladšie ako 18 rokov
 - Osoby so zápalom, poranením alebo léziami očí
 - Osoby s abnormálnym krvným tlakom
 - Osoby s duševnými problémami
 - Tehotné ženy alebo osoby v citlivých obdobiach
 - Osoby užívajúce lieky
 - Osoby, ktoré nedávno podstúpili operáciu očí alebo oblasti okolo očí
 - Osoby s fyzickým alebo duševným postihnutím
 - Osoby s horúčkou
 - Osoby so srdcovým ochorením
 - Osoby s rakovinou alebo iným nádorovým ochorením
 - Osoby s poškodenou kožou v dôsledku nadmerného slnenia
 - Osoby s poruchami imunity
 - Osoby s neurologickými ochoreniami
 - Osoby s abnormálnym hojením rán
 - Osoby, u ktorých sa v dôsledku syntetických vlákien objaví pigmentácia alebo kontaktná dermatitída

Ak podstupujete estetické ošetrovanie, nie ste si istí akýmikoľvek príznakmi alebo podstupujete akúkoľvek liečbu, poraďte sa pred použitím s lekárom.

- Nasledujúce oblasti nie sú vhodné na použitie tohto výrobku. Použitie v týchto oblastiach môže spôsobiť poranenie alebo kožné problémy:**
- Poranené miesta
 - Sliznica ústnej dutiny
 - Krváčajúce rany
 - Miesta okolo pohlavných orgánov
 - Zapálené oblasti
 - Oblasť s léziami, výrážkami, atď.
 - Zčervenané alebo podráždené miesta
 - Oblasť, ktorá svrbí

- Upozornenie:**
- Pri obsluhu tohto výrobku sa uistite, že máte suché ruky.
 - Tento výrobok je určený iba na domáce použitie a nie je zdravotníckym prostriedkom. Nie je určený na diagnostické, terapeutické ani žiadne komerčné použitie. Výrobok je presný prístroj.
 - Zabráňte pádom výrobku, nadmernému tlaku a nekladte na neho žiadne ťažké predmety, aby ste neovplyvnili jeho výkon. Po použití ho riadne skladujte.
 - Dodržujte odporúčanú dobu a frekvenciu používania podľa inštrukcií v tomto návode, aby ste predišli neprijemným pocitom alebo zraneniu.

02

- Počas menštruácie alebo dojčenia sa pred použitím poraďte s lekárom.
- Ak počas používania pociťte akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte výrobok používať.

Obsah balenia


Sada starostlivosti DEŇ 1
JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES (1)
JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2)
JOVS Diary HYDROGEL PATCHES (3)
COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-REVITALIZE EDITION (4)

Sada starostlivosti DEŇ 2
JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES (1)
JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5)

Sada starostlivosti DEŇ 3
JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES (1)
JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2)
JOVS Diary HYDROGEL PATCHES (3)
COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-FORTIFY EDITION (6)

Sada starostlivosti DEŇ 4
JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES (1)
JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5)

Popis produktu

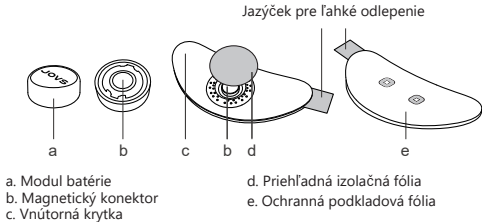

03

DEŇ 1




- Očistite si tvár a jemne ju osušte.




2. Vyberte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1), nalepte ich na požadovanú oblasť pod očami, nechajte pôsobiť 5 minút, potom ich odstráňte a opláchnite zvyšky z náplasti vodou.



3. Uistite sa, že máte tvár a ruky suché, potom vyberte náplasti BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2) a jemne ich naneste pod oči.

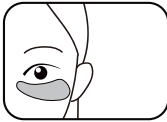

4. Vyberte náplasti HYDROGEL PATCHES (3) a nalepte ich na náplasti BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2). Ľahko ich pritlačte končekmi prstov, aby dobre prilnuli . Po odstránení náplasti ich znovu nepoužívajte.

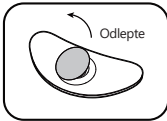


5. Vyberte kapsle COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-REVITALIZE EDITION (4). Vyberte modul batérie, zlúpnite priehľadnú izolačnú fóliu z látkovej náplasti a modul batérie magneticky znova pripnite. Náplasť sa rozsvieti.

04



6. Držte jazyček dvoma prstami, zlúpnite zadnú stranu látkovej náplasti a priložte ju cez náplasti HYDROGEL PATCHES (3). Jemne ju pritlačte, aby dobre prilnula. Po odstránení ju znova n epoužívajte.

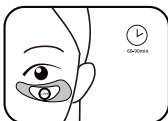

7. Nechajte pôsobiť 60–90 minút, potom odstráňte všetky nanesené produkty. Zlúpnite zostávajúce náplasti, opláchnite zvyšky z tváre vodou a pokračujte v bežnej starostlivosti o pleť.

DEŇ 2



1. Vyčistite si tvár a udržiajte oblasť očí mierne hydratovanú.



2. Uistite sa, že máte suché ruky. Potom vyberte náplasti ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5) a nalepte ich pod oči tak, aby tesne priliehali.



3. Vyberte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1), priložte ich na náplasti ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5) a jemne pritlačte. Nechajte pôsobiť 15–20 minút, kým sa náplasti úplne nerozpustia a nevstrebajú

05



4. Odstráňte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1), opláchnite vodou zvyšky z tváre a pokračujte v starostlivosti o pleť.

DEŇ 3




1. Očistite si tvár a jemne ju osušte.



2. Vyberte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1), nalepte ich na požadovanú oblasť pod očami a nechajte ich 5 minút pôsobiť. Potom ich odstráňte a opláchnite si vodou zvyšky z tváre.




3. Uistite sa, že máte tvár a ruky suché. Potom vyberte náplasti BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2) a jemne ich naneste pod oči.

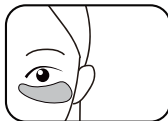


4. Vyberte náplasti HYDROGEL PATCHES (3) a nalepte ich na náplasti BLACK THORN ESSENCE PATCHES (2). Ľahko ich pritlačte končekmi prstov, aby dobre prilnuli. Po odstránení ich znovu nepoužívajte.

06

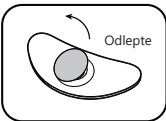

Odlepte

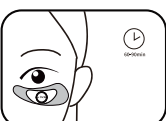

DEŇ 4




1. Vyčistíte si obličej a udržiajte oblasť očí mierne hydratovanou.



2. Uistite sa, že máte suché ruky. Potom vyberte náplasti ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5) a nalepte ich pod oči tak, aby tesne prilnuli.

07

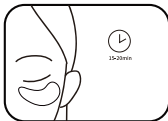

3. Vyberte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1) a priložte ich na náplasti ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES (5). Jemne ich pritlačte. Nechajte pôsobiť 15–20 minút, kým sa náplasti úplne nerozpustia a nevstrebajú.



4. Odstráňte hydratačné náplasti DEEP MOISTURE PATCHES (1), opláchnite vodou zvyšky z tváre a pokračujte v starostlivosti o pleť.

Technické parametre

Názov produktu	JOVS RevivaEye kolagénové očné náplasti
Model	JF1
Výstupná vlnová dĺžka	590 nm, 660 nm, 850 nm
Batéria	40mAh, 3V
Norma	FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B

Pokyny na likvidáciu batérií:

Pred likvidáciou zariadenia je nutné vybrať batériu:

- Demontujte kryt výrobku.
- Odpojte vnútornú kabeláž a vyberte batériu.

Dôležité:

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Batériu bezpečne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

08

Zvláštne pokyny

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o súlade s predpismi:

Vyhlasenie o súlade s predpismi EÚ
Infinite Reach Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii online na adrese www.jovs.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

TYGOTEC s.r.o., Studeněves 138
27379 Studeněves - Česká Republika
info@tygotec.eu



POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM – Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu . Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

09