

IPL depilátor
Beauty Cool



Návod na použitie

Vážená zákazníčka/Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku.

Nasledujúci návod bol pripravený na základe najnovších poznatkov v odbore kozmetológie. Krok za krokom Vás prevedie procesom laserovej depilácie, aby ste mohli naplno využiť moc prístroja a užívať si účinky po dlhú dobu.

O výrobku

Garett Beauty Cool slúži na odstránenie nežiaducich chĺpkov v domácich podmienkach. Ide o ľahký a šikovný prístroj, ktorý si môžete vziať všade so sebou a vykonať ošetrovanie v čase, ktorý vám vyhovuje, aby nedošlo k prerušeniu série ošetrovaní. Použitie technológie **IPL (intenzívne pulzné svetlo)** zaručuje trvalé a bezbolestné odstránenie chĺpkov. Svetelný lúč vyžarovaný prístrojom je pohltený tmavým pigmentom chĺpku (melanínom), čo v dôsledku poškodzuje a účinne oddaľuje jeho rast. Chladiaci systém navyše zaručuje komfort počas procedúry. Ľahko a neinvazívne sa zbavíte nežiaducich chĺpkov z tváre, podpazušia, nôh, paží, oblasti bikín a chrbta. Životnosť lampy je 999 999 impulzov, čo umožňuje dlhodobé používanie prístroja a systematické používanie zaisťuje hladkú pokožku po roky.

MOŽNOSTI PÔSOBNIA:

- oneskorený opätovný rast chĺpkov
- redukcia zbytočných chĺpkov
- hladká pokožka po mnoho mesiacov

Cyklus rastu chĺpkov sa skladá z rôznych fáz. Technológia IPL je účinná iba vtedy, ak sú chĺpky vo fáze rastu. Prirodzene 80 % všetkých chĺpkov je v rastovej fáze – zvyšok musí odrásť, aby mohol byť efektívne vystavený svetlu. Odporúča sa vykonať **min. 8-týždňová séria ošetrovaní**, po ktorej nasleduje pravidelné

osvieženie, aby sa zabezpečilo, že všetky chlípky budú účinne exponované v tú najlepšiu chvíľu.

INDIKÁCIE:

nadmerné/nežiaduce ochlpenie (tvár, podpazušie, nohy, paže, chrbát, bikiny)
tmavé ochlpenie – jasná, neopálená pokožka

KONTRAINDIKÁCIE:

jasné, šedé, ryšavé chlípky
nádorové ochorenia
tmavá pleť, svieže opálenie, tetovanie, permanentný make-up, pigmentové znamienka, po použití samoopalovacieho/opalovacieho mlieka
nepoužívajte na jazvy
tehotenstvo, dojčenie
užívanie fotosenzibilizujúcich liekov a prípravkov, napr. ľubovník bodkovaný, polopirin, ibuprofén, retinoidy/deriváty vitamínu A
vlasy oslabené depiláciou voskom/pinzetou/depilátorom
ošetrenie tváre ovocnými kyselinami, bieliace kúry
epilepsia (môže zosilniť záchvaty), fotosenzitivita, migrény
čerstvé rany, poškodenie epidermis, kožné alergie, iné zápaly vyskytujúce sa v ošetrovanej oblasti
osoby mladšie ako 18 rokov a osoby so zníženými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami (ak nie sú pod dohľadom)
nepoužívajte na pokožku hlavy, obočie, riasy, bradavky alebo intímne miesta v kontakte so sliznicami
používanie zariadenia v blízkosti očí môže spôsobiť vážne a trvalé poškodenie zraku a nepozerajte sa do zdroja svetla

nepoužívajte na mužskú tvár alebo krk
 pri ošetrení tváre (ženy) nepoužívajte prístroj nad lícnyimi kosťami
 nepoužívajte na tvár počas oparov alebo bezprostredne po ich zahojení

Odtieň pleti Farba chĺpkov						
						
biela/sivá 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
svetlý blond 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ryšavé 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
tmavý blond 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
hnedé 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
tmavo hnedé 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
čierne 	✓	✓	✓	✓	✗	✗


Funkcie výrobku

IPL – svetelný lúč vyžarovaný zariadením je absorbovaný melanínom (pigment v chĺpkoch). Čím je teda pleť svetlejšia a chĺpky tmavšie, tým je ošetrovanie účinnejšie. Vlasové folikuly sa oslabujú, čo spôsobuje vypadávanie chĺpkov a pravidelné vystavovanie svetlu bráni rastu nových chĺpkov.

5 úrovni intenzity práce – umožňuje ošetrovanie prakticky akéhokolvek typu pleti, s rôznymi prahmi citlivosti. Odporúča sa používať daný režim v súlade s určením. Neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie režimov pre iné časti tela, než je odporúčané. **Poradie režimov: od najslabšieho - I po najsilnejšie - V.**


Auto/manuálny režim - automatická alebo manuálna aktivácia lampy. Zaisťuje pohodlie a komfort vykonávania ošetrovania prispôsobeného potrebám a individuálnym pocitom. **Zmeňte režim stlačením a podržaním tlačidla spustenia lampy po dobu 3 s.**

Režim I - FACE Režim II - BODY Režim III - ARMPIT Režim IV - BIKINI Režim V - BEAUTY

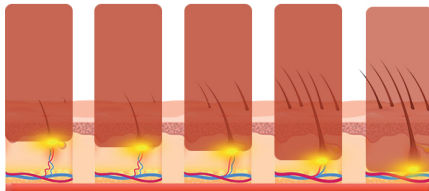

Chladienie – manuálna regulácia funkcie umožňuje bezbolestné a pohodlné ošetrovanie.

Opis výrobku

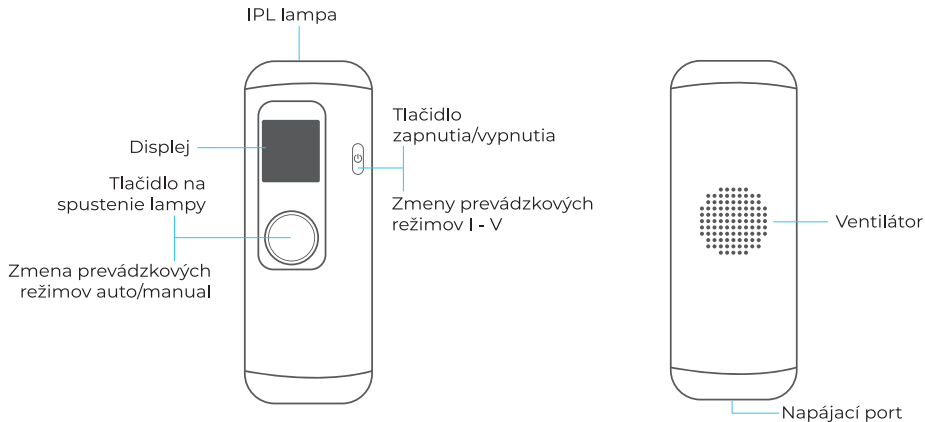

Opis displeja

Aktuálny prevádzkový režim

Dostupné režimy:

FACE
BODY
ARMPIT
BIKINI
BEAUTY

Face



Prevádzkový režim: **CHLADENIE**



Prevádzkový režim: **AUTO/MANUAL**

Zmeňte režim stlačením tlačidla spustenia lampy po dobu 2 s.

Technická špecifikácia

Názov výrobku: Garrett Beauty Cool	
Plocha vyžarovania svetla: 3 cm ²	Výkon: 24 W
Dĺžka svetelného lúča: 480 - 1100 nm	Hmotnosť výrobku (čistá): 230 g
Typ napájania: sieťové	Rozmery: 163 x 60 x 37 mm

Viac informácií o tomto prístroji je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.


Návod na použitie

Pred začatím ošetrovania:

Oholte oblasť tela, ktorú chcete depilovať.

Pleť je nutné očistiť od kozmetických prípravkov a osušiť.

Pred prvým ošetrením vykonajte test na alergiu (2 - 3 svetelné pulzy, napr. na lýtku a pozorujte kožu po dobu 24 hodín, aby ste skontrolovali prípadné alergické reakcie alebo vedľajšie účinky).

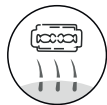

Krok 1

Pripojte napájací zdroj k zariadeniu.



Krok 3

Nasadte si ochranné okuliare, ktoré sú súčasťou sady.



Krok 2

Zapnite zariadenie podržaním ikony napájania na niekoľko sekúnd. Budete počuť bežiaci ventilátor. Nastavte výkon impulzu krátkym stlačením tlačidla napájania. Na výber máte 5 úrovní. Stlačením a podržaním tlačidla spustenia lampy po dobu 2 s zmeníte automatický/ručný režim.



Krok 4

Umiestnite zariadenie kolmo ku koži tak, aby ste zaistili plný kontakt hlavy s jej povrchom. Ak je zariadenie správne nastavené, obrazovka začne blikať. Krátko stlačte hlavné tlačidlo zariadenia. Zobrazí sa svetelný impulz a aktivuje sa režim chladenia.

V závislosti na vašich individuálnych pocitoch môžete zvýšiť/znížiť výkon impulzu.

Krok 5

Presuňte hlavu na ďalšie miesto, ktoré má byť depilované a postupujte rovnako ako v predchádzajúcom bode.



Nikdy nepoužívajte zariadenie na rovnakom mieste dvakrát!


Časti tela	Czas pracy	Odporúčany prevádzkový režim
podpazušie	4 - 5 min	Manuálny režim bleskovej lampy
bikini	8 - 10 min	Manuálny režim bleskovej lampy
okolie úst	2 - 3 min	Manuálny režim bleskovej lampy
stehná	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy
lýtka	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy
paže	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy
hrudník	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy
chrbát	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy
brucho	25 - 30 min	Manuálny režim bleskovej lampy

Upozornenie po vykonanom ošetrení:

Depilované miesta nevystavujte pôsobeniu slnka. Chráňte svoju pokožku pred slnkom počas celej doby depilácie, najmä prvých 48 hodín po poslednej depilácii. Používajte krémy s UV filtrom. Ak cítite nepohodlie a pokožka je začervenaná a opuchnutá, použite chladivý gél na popáleniny alebo napr. **mezoterapeutický prístroj Garrett Beauty Fresh Pro** alebo **Garrett Beauty Magic Skin**.


Na depilované miesta nepoužívajte parfémy, krémy, pleťové vody alebo vonné dezodoranty/antiperspiranty. Bezprostredne po ošetrení sa vyhnite horúcim kúpeľom, saunám a procedúram, ktoré spôsobujú podráždenie pokožky, napr. peeling, masírovanie pokožky drsnou rukavicou a pod.

Ošetrovanie sa odporúča vykonávať v 7-dňových intervaloch prvý mesiac a 2-týždňových intervaloch ďalší mesiac. V závislosti od rýchlosti rastu chĺpkov minimálne 8 týždňov. Následne sa pre zachovanie účinkov odporúča opakovať ošetrovanie každé 4 týždne. Častejšia depilácia neurýchli očakávané výsledky vzhľadom na to, že rast nových chĺpkov trvá cca. 4 týždne.

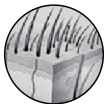

1 - 4 týždne, 1krát za 7 dní

Chĺpky prirodzene vypadávajú a ich počet sa znižuje.

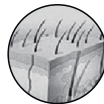


4 - 8 týždňov, 1krát za 14 dní

Nové chĺpky vypadávajú a ich rast je spomalený.



Po 8 týždňoch

Chĺpky sa stávajú tenšími a rastú pomalšie, takže pokožka zostáva hladká a krásna.

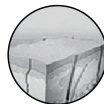

Na zachovanie účinkov sa odporúča vykonávať depiláciu každé 4 týždne.

Upozornenie pre používateľov

1. Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
2. Depilátor nie je pre každého. Najúčinnnejšia je pre osoby so svetlou pleťou a tmavým ochlpením.
3. Depilátor funguje iba po pripojení k zdroju napájania. Používajte iba vyhradený kábel.
4. Prístroj nepoužívajte ani sa ho nepokúšajte odpojiť zo zásuvky mokrými rukami.
5. Nepoškodzuje ani neupravuje napájací kábel a výrobok, pretože to môže viesť k jeho poškodeniu.
6. Zabráňte znečisteniu portu a napájacieho kábla.
7. Prestaňte používať pokiaľ je poškodená zástrčka alebo napájací kábel, alebo dokonca pokiaľ sa jedna zo súčastí zahrieva.
8. Použitie príslušenstva, ktoré nie je dodávané s týmto výrobkom, môže byť nebezpečné.
9. Neskladujte výrobok na vlhkých miestach, pri vysokých teplotách, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
10. V prípade poškodenia prestaňte používať a kontaktujte predajcu alebo priamo servis spoločnosti Garrett.
11. Nepoužívajte prístroj na podráždenú, alergickú alebo zapálenú pokožku. Pozri - kontraindikácie.
12. Nenechávajte prístroj v dosahu detí.
13. Nedotýkajte sa okienka svetelných impulzov – mohlo by dôjsť k poškodeniu senzora a popáleniu pokožky.
14. Po dokončení ošetrenia odpojte zariadenie od zdroja napájania.
15. Nepozerajte sa priamo do bleskovej lampy a nepoužívajte zariadenie v blízkosti očí.
16. Ak si nie ste istí, či je pre Vás depilátor vhodný, poraďte sa so svojím lekárom.
17. Prerušte ošetrovanie, pokiaľ Vaša pokožka vykazuje známky popálenia alebo sa objavia pluzgieri.

18. Doba pôsobenia depilátora na tvári by nemala presiahnuť 10 minút. Odporúčajú sa 5 sekundové intervaly medzi impulzmi.
19. Chráňte zariadenie pred otrasmi alebo pádom počas prepravy.
20. Nesprávne použitie zariadenia môže spôsobiť poškodenie očí alebo popáleniny kože.
21. Na ošetrenie tváre je zariadenie určené na odstránenie chlpkov u žien.
22. Zariadenie nie je určené len na domáce použitie.

Oprava a údržba

1. V prípade poškodenia alebo poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
2. Po každom použití výrobok dôkladne očistite. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.
3. Zariadenie nie je úplne vodeodolné a nemalo by sa umývať vodou.
4. Odporúča sa zariadenie skladovať na suchom a vetranom mieste, aby sa predĺžila jeho životnosť.



GARETT SPÓŁKA Z O.O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v zhode so Smernicou 2014/30/EU, Smernicou 2014/35/EU, Smernicou 2011/65/EC. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.garett.eu



GARETT

Záruka a reklamácia

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Záručné podmienky/kontaktné údaje sú k dispozícii na strane:

www.garett.eu

Výrobca:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce

www.garett.eu



Správna likvidácia produktu
(odpadové elektrické a
elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



Vyrobené v ČR
v. 1/24