

LANAFORM

COMFORT


Ohrievací vankúš

BEZDRÔTOVÁ VYHRIEVANÁ PODUŠKA


Návod na používanie





1

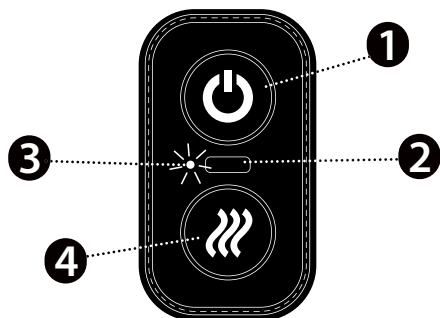

2

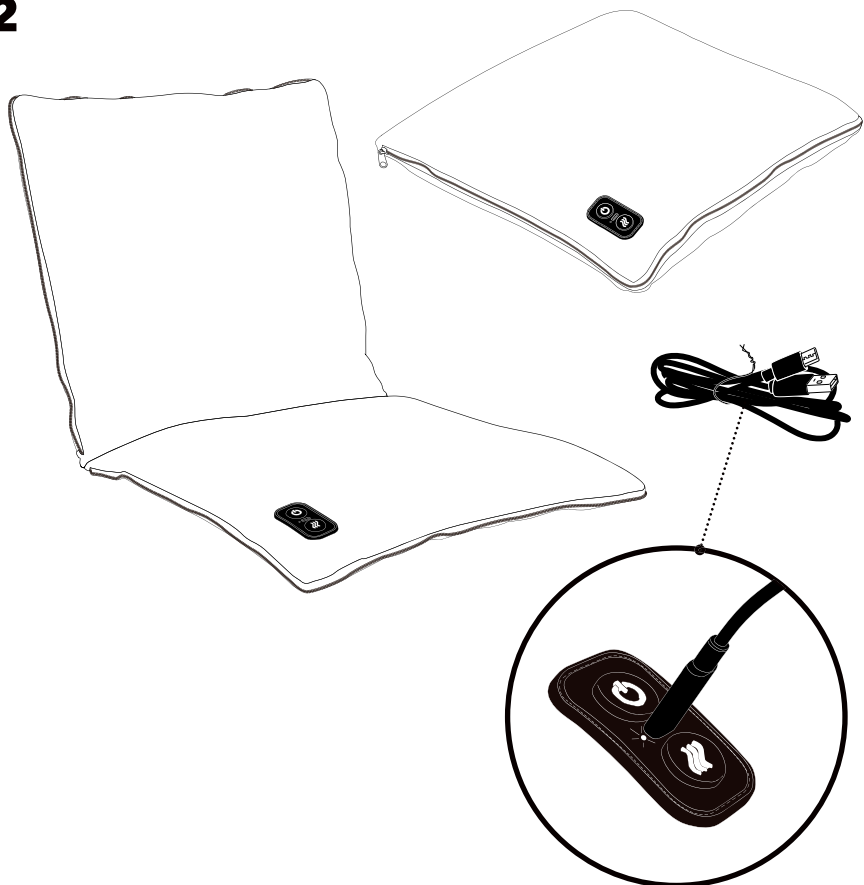

3

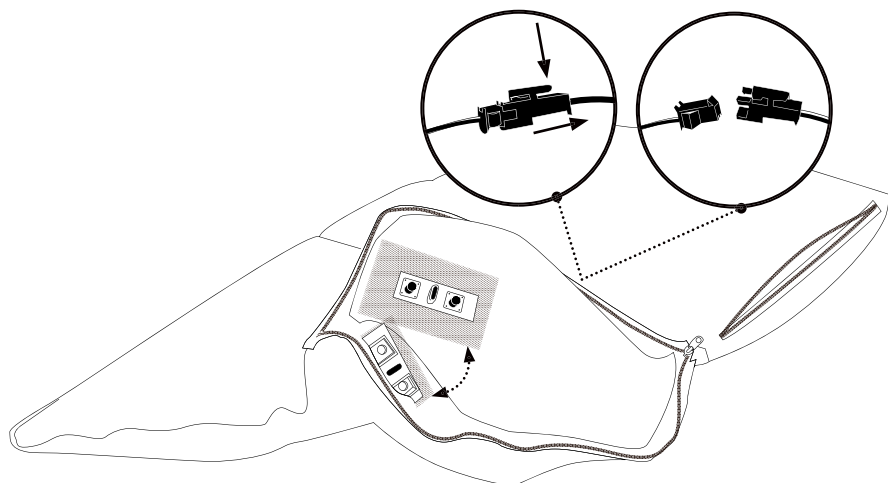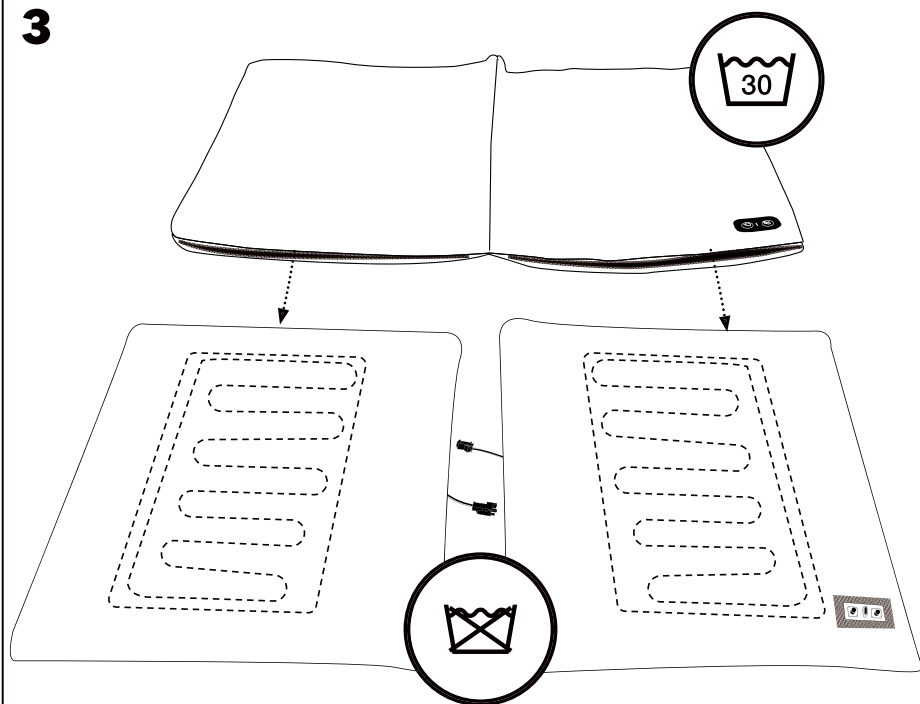

Obsah balenia

Skontrolujte, či je vonkajší obal výrobku nepoškodený a sú prítomné všetky položky. Pred použitím sa uistite, že výrobok a jeho príslušenstvo nemajú žiadne viditeľné znaky poškodenia, a že bol odstránený celý obal. Ak máte pochybnosti, výrobok nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu, alebo uvedený zákaznícky servis.

- 1 ohrievací vankúš
- 1 USB kábel
- 1 návod na použitie

Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly sú použité v návode na použitie, na obale a na štítku výrobku:

	VAROVANIE: Upozornenie naznačujúce riziko poranenia alebo nebezpečia pre vaše zdravie
	POZOR: Bezpečnostná poznámka naznačujúca možné poškodenie výrobku/príslušenstva
	POZNÁMKA: Upozornenie na dôležitú informáciu
	Likvidujte v súlade so Smernicou o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE)
	Čítajte návod
	Výrobok je dvakrát izolovaný, preto je v súlade s Ochrannou triedou 2
	Neprepichujte ihlami
	Nepoužívajte výrobok, keď je prehnutý alebo zvinutý
	Nie je určené pre mladé deti (0–3 roky)
	Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných predpisov
	Maximálna teplota prania 30 °C, ultra jemný režim
	Nebieľte
	Nežmýkajte
	Nežehlite

	Nečistite chemicky
	Výrobca
	Výrobok a súčasti obalu likvidujte separátne podľa miestnych požiadaviek
	Súčasti obalu likvidujte separátne podľa miestnych požiadaviek
	Papierový obal je buď recyklovateľný alebo vyrobený z recyklovaného materiálu

Dôležité informácie. Uchovajte pre neskoršie použitie

 **Prosím, prečítajte si celý návod pred použitím výrobku, najmä však týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.**

 **Fotografie a iné obrázky výrobku v tomto návode a na obale sú také presné, ako sa dá, no nemusia byť dokonalou reprodukciou výrobku.**

Výstraha

- Tento výrobok používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.

- Pred zapojením výrobku do siete sa uistite, že napätie vo vašej zásuvke je rovnaké, ako napätie uvedené na výrobku.

- Deti mladšie ako 3 roky nesmú tento výrobok používať, pretože nie sú schopné včas reagovať v prípade prehriatia výrobku.

- Výrobok môžu používať deti vo veku od 3 do 8 rokov iba pod dohľadom, a pri voliči nastavenom na minimálnu teplotu.

- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo

mentálnou kapacitou, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom použití výrobku a rozumejú možným rizikám. Deťom nesmie byť dovolené hrať sa s výrobkom. Čistenie a údržbu výrobku smú deti vykonávať iba pod dohľadom.

- Tento ohrievací vankúš nie je určený na použitie v nemocnici. Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

- Nikdy nepoužívajte tento výrobok v miestnosti, v ktorej sa používajú aerosóly (spreje), alebo v miestnosti, kde je podávaný kyslík.

- Nepoužívajte ohrievací vankúš s inými ohrievačmi alebo na ohriatie iných predmetov (ohrievač nôh, termofor, atď.).

- Ak používate ohrievací vankúš počas niekoľkých hodín, odporúča sa nastavenie na najnižšiu teplotu ohrevu, aby sa predišlo prehriatiu.

- Nestláčajte vankúš (najmä na polohovateľných posteliach, alebo matracoch s oddelenými prvkami).

- **Nepoužívajte** ohrievací vankúš na zvieratá.
- **Výrobok** po použití alebo pred čistením odpojte od elektriny.
- **Pre** odpojenie výrobku ho najprv vypnite stlačením tlačidla ON/OFF, potom odpojte USB kábel, ak je to potrebné, a nakoniec vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- **Odpojte** ohrievací vankúš ak je príliš horúci.
- **Ak** výrobok spadne do vody, skôr ako ho z nej vytiahnete, odpojte ho od prívodu elektriny.
- **Ak** odkladáte ohrievací vankúš na dlhší čas, odložte ho na suché miesto. Pred prvým opakovaným použitím pozorne skontrolujte stav výrobku. Ak je poškodený USB kábel, treba ho nahradiť tým istým typom kábla, ktorý dostanete u výrobcu alebo na jeho popredajnom oddelení.
- **Nepoužívajte** prípojky, ktoré neodporúča LANAFORM alebo neboli dodané s výrobkom.
- **S** ohrievacím vankúšom používajte priložený USB kábel, alebo jeho ekvivalent.
- **Nenoste** výrobok za jeho USB kábel, ani nepoužívajte kábel ako držiadlo.
- **Elektrické** zariadenie nesmie byť nikdy ponechané zapojené do elektriny a bez dohľadu. Odpojte ho, keď ho nepoužívate.
- **Nepoužívajte** tento výrobok, ak je poškodená zástrčka, ak nefunguje správne, ak spadol na podlahu,

ak je poškodený, alebo ak spadol do vody. Ak sa niečo z tohto stane, nechajte si výrobok skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo v jeho popredajnom oddelení.

- **Nenaťahujte**, neskrúcajte, alebo neohýbajte kábel príliš silno.
- **Neškriabte** ohrievací vankúš ostrými predmetmi. Nepripevňujte ohrievací vankúš pripínaciami alebo inými kovovými predmetmi.
- **Nevystavujte** ohrievací vankúš slnečnému svetlu a nežehlite ho. Tak predídete poškodeniu izolácie elektrického obvodu.
- **Nepoužívajte** ohrievací vankúš ak je mokrá a nezapínajte ho, aby sa vysušil.
- **Prijmite** všetky opatrenia na prevenciu popálenín.
- **Ak** máte starosť o svoje zdravie, poraďte sa pred použitím tohto výrobku s lekárom.
- **Ak** počas používania tohto výrobku pocítite bolesť, ihneď ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- **Nepoužívajte** tento výrobok na žiadnu časť tela, ktorá je opuchnutá, zapálená, alebo na nej máte vyrážky.
- **Ak** pri používaní ohrievacieho vankúša spozorujete nezvyčajné sčervenanie pokožky, alebo nepríjemné pocity až bolesti, prestaňte ho používať na najmenej hodinu. Ak prejav pokračuje, odložte použitie vankúša a bezodkladne sa podľa potreby poraďte s lekárom.
- **Elektrické** a magnetické pole tohto elektrického zariadenia môže na-

rušovať činnosť kardiostimulátora. Tieto sú však hlboko podlimitné: sila elektrického poľa: max. 5000 V/m; sila magnetického poľa: max. 80 A/m; magnetická indukcia: max. 0,1 mT. Preto sa vždy pred použitím tohto ohrievacieho vankúša poraďte s lekárom a výrobcom kardiostimulátora.

- **Používateľ** môže zažiť popálenie kože alebo tepelný šok keď zaspí s výrobkom nastaveným na vysoký výkon.

Predstavenie

Ďakujeme vám, že ste si vybrali Ohrievací vankúš LANAFORM. Tento útulný a pohodlný 2 v 1 ohrievací vankúš poteší aj tých najzimomravejších! Vďaka svojej schopnosti rýchlo sa zohriať vám dáva Ohrievací vankúš utišujúce teplo za niekoľko minút, zahrnujúc vás nenapodobiteľným pohodlím. Vybavený dvoma intenzitami tepla a nabíjateľnou batériou vám Ohrievací vankúš umožňuje pohodlne relaxovať v teple, či už na vašej pohovke ako hrejivá poduška, alebo ako hrejivý poťah sedadla.

Opis 1

- 01 tlačidlo ON/OFF
- 02 USB konektor
- 03 LED indikátor ON/OFF a teploty
- 04 nastavenie teploty

Príprava pred použitím 2

Ohrievací vankúš LANAFORM je určený na zahriatie ľudského tela. Má sa používať buď:

Ako poduška:

V tomto prípade sa uistite, že je vankúš uzavretý pomocou zipsu na boku výrobku.

Ako hrejivý poťah sedadla:

Rozprestrite vankúš rozopnutím zipsu na okraji vankúša.

- **Keď** ukladáte výrobok, nechajte ho pred zložením vychladnúť.

- **Výrobok** často kontrolujte pre poškodenie alebo opotrebovanie. Ak nájdete znaky opotrebovania alebo poškodenia, alebo ak bol výrobok používaný nesprávne, alebo nefunguje, vráťte ho dodávateľovi skôr, než ho zapnete.

Ak nie je kábel výrobku správne položený, hrozí zamotanie, zaškrtenie, uvoľnenie alebo rozdrvenie. **Používateľ** musí zaistiť, aby voľné spojenia a káble boli bezpečne usporiadané.

Nabíjanie 2

Výrobok môžete nabíť pomocou priložené-
ho USB kábla. Spojte výrobok USB káblom
s vhodným adaptérom. **Potom zasuňte adap-
tér** do vhodnej elektrickej zásuvky.

Počas nabíjania výrobku sa rozsvieti a bliká
červené svetlo. Keď je výrobok nabitý, svetlo
sa zmení na zelené.

Bezpečnosť

Tento ohrievací vankúš je vybavený bez-
pečnostným systémom. Elektronický senzor
chráni vankúš pred prehriatím na celom jeho
povrchu a v prípade poruchy ho automaticky
vypne. Ohrievací vankúš je vybavený bez-
pečnostnou ochranou pred prehriatím a je
nastavený na nepretržitú prevádzku počas
45 minút.

Pokyny

1. Pre zapnutie výrobku stlačte tlačidlo ON/OFF počas 2 sekúnd. Rozsvieti sa zelené LED svetlo.
2. Ohrievací vankúš má 2 úrovne intenzity teploty. Vyberte si, ktorú chcete (zelená LED = nízka intenzita; červená LED = vysoká intenzita) opakovaným stláčaním príslušného tlačidla.
3. Keď je batéria nabitá, môže ohrievací vankúš pracovať približne 90 minút. Je tiež možné použiť ohrievací vankúš s adaptérom. V tomto prípade zapojte USB kábel do konektora a pripojte adaptér do elektrickej zásuvky.

Výstraha

Ak používate Ohrievací vankúš s adaptérom, majte na pamäti, že USB port môže byť veľmi horúci. Nedotýkajte sa ho, kým používate výrobok.

Čistenie a údržba 3

Keď nepoužívate ohrievací vankúš a pred jeho čistením sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

- Uistite sa, že je výrobok vypnutý.
- Ak treba, odpojte adaptér a USB kábel.
- Pred čistením nechajte ohrievací vankúš vychladnúť.

Obal vankúša sa dá odstrániť a prať v práčke na 30 °C v programe pre jemné textílie.

Riešenie problémov

 Problém	 Príčina	 Riešenie
Vankúš sa nezohrieva	Vybitá batéria	Zapojte USB kábel do konektora vankúša a do adaptéru pre nabitie batérie, alebo použite vankúš pripojením USB kábla priamo do elektrickej zásuvky.

- 01 Otvorte 2 zipsy, aby ste sa dostali k vyhrievacím podložkám.
- 02 Potom odstráňte suchý zips z riadiacej jednotky.
- 03 Rozpojte spojovací kábel medzi 2 vyhrievacími podložkami.
- 04 Potom odnímate 2 vyhrievacie podložky. Teraz môžete obal vyprať v práčke.
- 05 Po vypraní a vysušení obalu na vzduchu vráťte späť 2 vyhrievacie podložky a znova ich zapojte.
- 06 Opatrne vráťte riadiacu jednotku späť na jej miesto a uistite sa, že je USB konektor v správnej polohe.
- 07 Vráťte späť zipsy. Teraz môžete vyhrievací vankúš zasa použiť.

Vankúš môžete čistiť ručne pomocou vlhkej handričky alebo špongie a vody, prípadne s malým množstvom tekutého detergentu na jemné tkaniny.

 **Dbajte na to, aby sa ohrievací vankúš nedostal do práčky alebo sušičky. Nesmie sa skrúcať, sušiť v sušičke, mangľovať ani žehliť.**

Keď vankúš sušíte, nepoužívajte na zavesenie štipce ani nič podobné. Nevystavujte ohrievací vankúš zdrojom tepla, ako sú slnko, radiátor atď.

 **V žiadnom prípade ohrievací vankúš nezapínajte, aby sa vysušil.**

Uchovávanie

Ak vankúš dlhší čas nepoužívate, odporúča sa skladovať ho v pôvodnom obale na suchom mieste a nič naň neklásť.

Technické údaje

- Označenie výrobku: LA180504
- Výkon: 10 W
- Napätie: DC5V 2,0 A
- Rozmery: 42 × 42 × 11 cm



Odporúčania pre odstraňovanie odpadu

Celý obal pozostáva z materiálov bezpečných pre životné prostredie, ktoré je možné využiť ako druhotné suroviny. Kartón sa umiestňuje do kontajnera na zberový papier. Plastové fólie sa umiestňujú do nádoby na plastový odpad.

Ak už zariadenie nepoužívate, odstráňte ho vhodným spôsobom v súlade s platnou legislatívou.

Obmedzená záruka

LANAFORM zaručuje, že tento výrobok je bez materiálových alebo továrenských nedostatkov počas dvoch rokov od jeho zakúpenia, s výnimkou nižšie uvedeného.

Záruka LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené normálnym používaním výrobku. Navyše sa záruka tohto výrobku LANAFORM nevzťahuje na poškodenia spôsobené zlým zaobchádzaním alebo nesprávnym používaním, nehody, pripájanie akéhokoľvek nepovoleného príslušenstva, úpravy výrobku, alebo na akékoľvek okolnosti mimo kontrolu spoločnosti LANAFORM.

LANAFORM nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné poškodenia.

Všetky predpokladané záruky správneho fungovania výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov odo dňa zakúpenia výrobku za predpokladu predloženia dokladu o zakúpení.

Po prijatí LANAFORM opraví váš výrobok ako treba, alebo ho nahradí a vráti vám ho. Reklamácie možno podávať výlučne cez Servisné centrum LANAFORM. Túto záruku ruší akýkoľvek zásah do výrobku osobou inou než Servisným centrom LANAFORM.





LANAFORM

HEATING PILLOW

LA180504 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

RUE DE LA LÉGENDE, 55
4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

+32 4 360 92 91

INFO@LANAFORM.COM

WWW.LANAFORM.COM