

LANAFORM

WELLNESS

CozyShiatsu

Masážna a vyhrievacia podložka Shiatsu

Masážní a vyhřívací polštář Shiatsu




SK

04

CZ

12

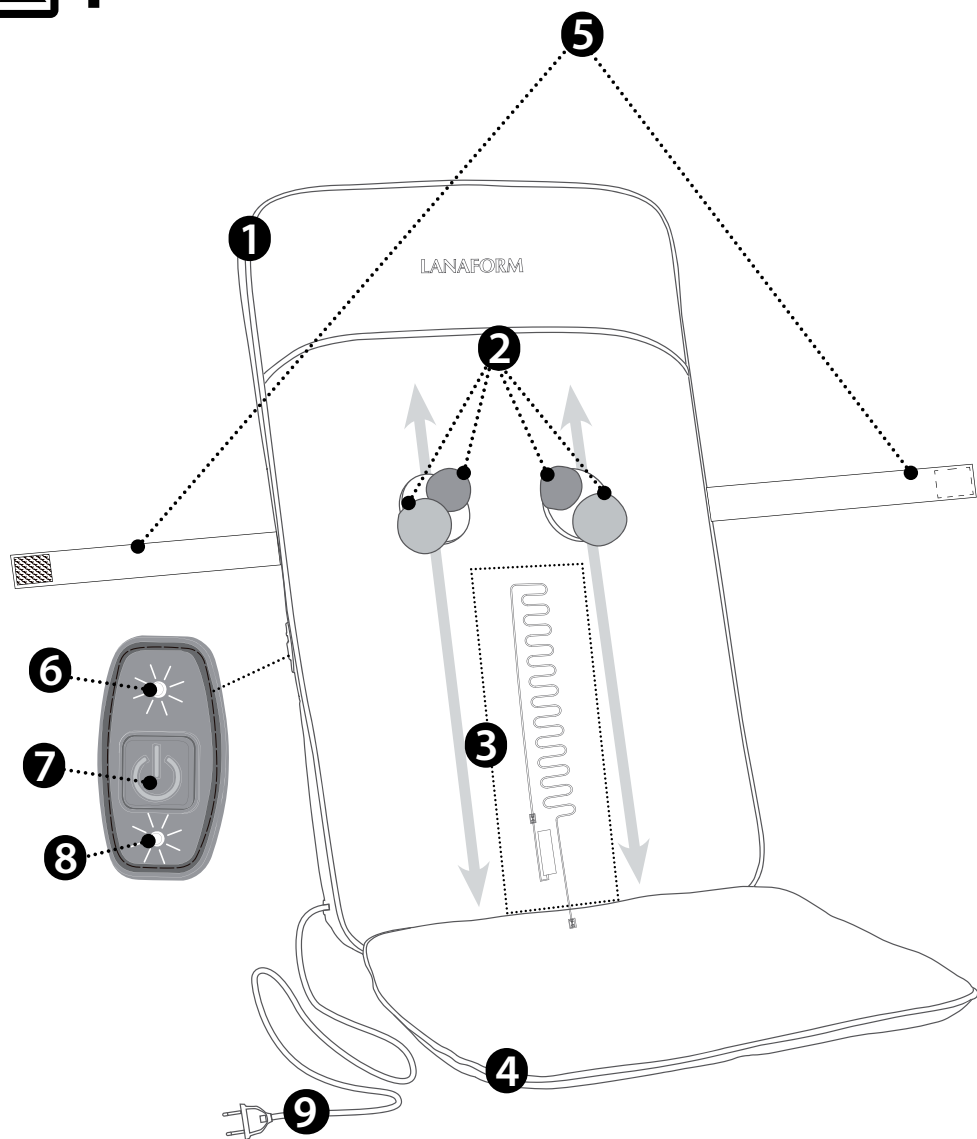

Obsah balenia

Skontrolujte, či je vonkajší kartónový obal nepoškodený a či sú v ňom všetky súčasti. Pred použitím sa uistite, že zariadenie nevykazuje žiadne viditeľné poškodenia a že boli odstránené všetky obalové materiály. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu alebo uvedený zákaznický servis.

- 1 masážna a vyhrievaná podložka na stoličku Cozy Shiatsu
- 1 návod na použitie

Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly sa používajú v návode na použitie, na obale a na typovom štítku zariadenia:

	VAROVANIE: Varovanie – riziko poranenia alebo ohrozenia zdravia.
	UPOZORNENIE: Bezpečnostné upozornenie týkajúce sa možného poškodenia zariadenia alebo príslušenstva, ktoré môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo. Ak sa tomu nezabráni, môže to spôsobiť menšie alebo ľahké poranenia.
	POZNÁMKA: Informácie osobitného významu.
	Prečítajte si pokyny.
	Nevpichujte ihly.
	Nevhodné pre dojčatá (0–3 roky)
	Výrobca
	Tento výrobok spĺňa platné európske a národné smernice.
	Likvidácia v súlade s európskou smernicou WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení).
	Oddel'te súčasti obalu a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Obalový papier je možné recyklovať alebo je vyrobený z recyklovaných materiálov.

	Oddelte jednotlivé časti výrobku a obalu a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Iba na použitie v interiéri.
	Zariadenie je vybavené dvojitou ochrannou izoláciou a spĺňa požiadavky triedy ochrany II.

Dôležité pokyny.

Uložte si ich pre budúce použitie.

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä tieto základné bezpečnostné pokyny.

📷 Fotografie a iné vyobrazenia výrobku v tomto návode a na obale sú čo najpresnejšie, nemusia však zaručovať presnú podobnosť so skutočným výrobkom.

Správne používanie

Toto zariadenie je určené výlučne na masáž chrbta jednotlivcov. Nenahrádza lekárske ošetrenie. Nepoužívajte masážne zariadenie, ak sa nachádzate v niektorej z nasledujúcich situácií.

⚠ Upozornenie

Masážne zariadenie nepoužívajte

- v prípade akéhokoľvek ochorenia alebo poranenia chrbta (napr. hernia disku, otvorená rana),
- ak si nie ste istí, či je masážny poťah na sedadlo vhodný pre vaše zdravie, poraďte sa s lekárom,
- pred použitím poťahu na sedadlo sa poraďte s lekárom, najmä
 - ak trpíte vážnym ochorením alebo ste podstúpili operáciu v oblasti hornej časti tela,
 - ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo akúkoľvek inú zdravotnícku pomôcku,
 - ak trpíte trombózou,
 - ak ste diabetik,
 - v prípade bolesti neznámeho pôvodu,
- počas tehotenstva,
- počas spánku,

- vo vozidle,
- na zvieratách,
- pri činnostiach, pri ktorých by nepredvídateľná reakcia mohla byť nebezpečná,
- po užití látok, ktoré môžu ovplyvniť vnímanie (napr. lieky proti bolesti, alkohol, drogy),
- dlhšie ako 15 minút (riziko prehriatia); pred ďalším použitím nechajte zariadenie vychladnúť aspoň 15 minút.

Zariadenie je určené výlučne na použitie popísané v tomto návode. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho alebo nevhodného používania.

⚠ Upozornenie

- Toto zariadenie je určené výlučne na domáce a súkromné použitie. Nesmie sa používať na profesionálne účely.
- Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní a chápu potenciálne riziká.
- Deti sa nikdy nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa zlikvidovať. Ak je trvalo pripojený k zariadeniu, je potrebné zlikvidovať celé zariadenie.
- Nikdy nevkladajte predmety do otvorov alebo pohyblivých častí. Uistite sa, že všetky pohyblivé komponenty zostávajú vždy voľné a bez prekážok.
- Nikdy neotvárajte zariadenie ani sa nepokúšajte opravovať ho sami. Mohlo by to poškodiť jeho prevádzku a zrušiť platnosť záruky.

Bezpečnostné upozornenie

Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku (úraz elektrickým prúdom, popálenie pokožky, požiar). Tieto bezpečnostné pokyny a upozornenia slúžia nielen na ochranu vášho zdravia a zdravia ostatných, ale aj na ochranu výrobku. Preto dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny a ak zariadenie odovzdávate niekomu inému, nezabudnite k nemu priložiť aj tieto pokyny.

- **⚠ Upozornenie** Uchovávajte obalový materiál mimo dosahu detí. Mohli by sa udusiť.
- **⚠ Upozornenie** Tak ako každé elektrické zariadenie, aj táto masážna jednotka sa musí používať šetrne a s opatrnosťou, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.

- Na čo si dávať pozor:
 - Používajte iba s elektrickým napätím uvedeným na obale.
 - Nepoužívajte zariadenie pri jeho zjavnom poškodení.
 - Nepoužívajte ho počas búrky.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenie okamžite vypnite a odpojte ho od napájania. Pri odpojovaní neťahajte za napájací kábel ani za samotné zariadenie. Zariadenie nikdy nedržte ani neprenášajte za napájací kábel. Kábel držte ďalej od horúcich povrchov. Vyhnite sa priškriknutiu, ohnitiu alebo skrúteniu kábla. Nikdy nekladajte ihly ani ostré predmety do kábla alebo potahu sedadla.
- Uistite sa, že potah masážneho sedadla a jeho napájací kábel neprídu do kontaktu s vodou, parou alebo inými kvapalinami.
- Preto používajte zariadenie
 - iba v interiéri, v suchých podmienkach – nikdy v kúpeľni, saune ani v žiadnom inom vlhkom prostredí,
 - iba suchými rukami.
- Ak potah sedadla spadne do vody, nikdy ho nevyberajte bez toho, aby ste ho najprv odpojili zo zásuvky.
- Neupustite potah sedadla a nevystavujte ho silným nárazom.
- Toto zariadenie smie opravovať iba kvalifikovaný technik. Akákoľvek nesprávna oprava môže predstavovať vážne riziko pre používateľa. V prípade potreby opravy kontaktujte zákaznícky servis alebo svojho predajcu.
- Zipsy na operadle a sedadle sa nesmú otvárať; sú určené výhradne na opravárske účely.
- ⚠ Akékoľvek nesprávne alebo nevhodné používanie tohto výrobku môže viesť k nebezpečenstvu požiaru
- Preto nikdy nepoužívajte masážny potah na sedadlo
 - pod dekou alebo inou látkou,
 - v blízkosti horľavých látok.
- Zariadenie musí byť po každom použití a pred čistením vypnuté a odpojené od napájania.
- Používajte zariadenie iba vo zvislej polohe opreté o operadlo alebo inú pevnú podložku; nikdy ho nekladte na podlahu.
- Neopierajte sa celou váhou o masážnu časť potahu sedadla (či už sedíte, ležíte alebo stojíte) a nekladte na zariadenie žiadne predmety.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Predstavenie

Ďakujeme, že ste si vybrali elektrický masážny a vyhrievaný poťah na sedadlo **CozyShiatsu** od spoločnosti **LANAFORM**. Bol špeciálne navrhnutý pre vaše pohodlie a poskytuje hlboký a upokojujúci relaxačný zážitok. Nastaviteľné úrovne intenzity vyhrievania a masáže sa ľahko prispôbia vašim potrebám pomocou jediného ovládacieho tlačidla. **CozyShiatsu** so svojimi mäkkými gélovými masážnymi hlavicami zaručuje optimálny komfort.

Popis produktu 1

Príslušné schémy nájdete na strane 3.

- 01** Operadlo masážneho a vyhrievacieho sedadla
- 02** Otočné gélové masážne hlavice Shiatsu
- 03** Vyhrievacia zóna
- 04** Povrch sedadla
- 05** Upevňovacie popruhy
- 06** LED indikátory zobrazujúce úrovne intenzity masáže
- 07** Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie / Intenzita / Vyhrievanie
- 08** LED indikátor signalizujúci, či je funkcia vyhrievania aktivovaná
- 09** Napájací konektor

Bezpečnosť

Upozornenie

Tento masážny a vyhrievací poťah na sedadlo je vybavený bezpečnostným systémom. Elektronický senzor zabráňuje prehriatiu vyhrievacej zóny na celej jej ploche tým, že v prípade poruchy automaticky vypne zariadenie.

Maximálny čas prevádzky a automatické vypnutie:

Hneď po zapnutí podložky sa aktivuje funkcia automatického vypnutia, ktorá je nastavená na 15 minút.

Masážne zariadenie používajte maximálne 15 minút, potom ho nechajte vychladnúť. Dlhšie používanie môže svaly nadmerne stimulovať a spôsobiť napätie namiesto relaxácie. Masáž môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla ON / OFF / Intenzita / Ohrievanie.

Návod na použitie

Umiestnenie vyhrievanej a masážnej podložky Shiatsu

- 01** Podložku položte zvisle na vhodnú stoličku, ktorá má sedák aj opierku chrbta (stolička, pohovka alebo podobný nábytok). Uistite sa, že sedák a opierka chrbta ležia rovno na celej ploche stoličky.
- 02** Na upevnenie poťahu na sedadlo použite suché zipsy.
- 03** Umiestnite napájací kábel tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo potknutia sa. Zapojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky.

Spustenie zariadenia

⚠ Upozornenie

Nevkladajte žiadnu časť tela, najmä prsty, medzi rotujúce masážne hlavice alebo ich podpery vo vnútri zariadenia.

① Najskôr jemne pritlačte chrbát na podložku Shiatsu. Potom opatrne skontrolujte, či je masážna poloha pre vás pohodlná, a postupne preneste svoju váhu na podložku. Masáž by mala byť vždy príjemná a relaxačná. Ak sa masáž stane bolestivou alebo nepohodlnou, zastavte ju alebo upravte svoju polohu alebo vyvíjaný tlak.

01 Pripojenie zariadenia: Zapojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky. Pri prvom použití sa masážne hlavice automaticky presunú do správnej počiatočnej polohy v zadnej časti sedadla.

02 Správne umiestnenie: Sadnite si pohodlne a vzpriamene na podložku umiestnenú na vhodnej stoličke. Uistite sa, že sedíte uprostred, aby sa masážne hlavice mohli pohybovať vľavo a vpravo od vašej chrbtice.

03 Spustenie zariadenia: Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť / Intenzita / Ohrievanie počas 5 sekúnd. LED indikátor intenzity svieti zelenou farbou. Rotujúce masážne hlavice sa pomaly pohybujú nadol z počiatočnej polohy v hornej časti potahu sedadla a potom pokračujú v pohybe hore a dole pozdĺž chrbta.

04 Nastavenie úrovne intenzity: Zariadenie má dve úrovne intenzity. Pre prepínanie medzi nimi stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie / Intenzita / Ohrievanie na 2 sekundy počas masáže.

- Zelená LED = nízka intenzita

- Modrá LED = vysoká intenzita

05 Aktivácia funkcie vyhrievania: Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť / Intenzita / Vyhrievanie počas 1 sekundy, aby ste aktivovali funkciu vyhrievania. LED dióda pre funkciu vyhrievania sa rozsvieti červenou farbou. Ak chcete funkciu vyhrievania deaktivovať, zopakujte rovnaký krok. Červená LED dióda zhasne.

06 Vypnutie zariadenia: Na vypnutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie / Intenzita / Ohrievanie počas 5 sekúnd. LED indikátor intenzity bliká zelenou farbou. Masážne hlavice sa pomaly vrátia do svojej počiatočnej polohy. V závislosti od ich polohy v čase vypnutia to môže trvať niekoľko sekúnd. Počkajte, kým sa masážne hlavice nevrátia do svojej počiatočnej polohy, a až potom odpojte napájací kábel. Nikdy neodpájajte masážny a vyhrievaný potah sedadla počas prevádzky. Vždy vypnite zariadenie a počkajte, kým sa masážne hlavice nevrátia do svojej počiatočnej polohy, a až potom ho odpojte.

Čistenie a údržba

⚠ Upozornenie

- Pred čistením odpojte zariadenie od napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Malé škvrny možno odstrániť mäkkou, vlhkou handričkou a v prípade potreby trochu jemného tekutého čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- Zariadenie používajte len vtedy, keď je úplne suché.
- Čistite potah na sedadlo prísne podľa pokynov. Za žiadnych okolností nesmie do zariadenia vniknúť tekutina.
- Zipsy nie sú určené na zvlčenie potahu a jeho a pranie. Slúžia výhradne na výrobné a oprávňenské účely.

Skladovanie

Ak masážnu a vyhrievanu podložku dlhší čas nepoužívate, odporúča sa uložiť ju do pôvodného obalu, uchovávať na suchom mieste a vyhnúť sa kladeniu akýchkoľvek predmetov na ňu.

Riešenie problémov

Problém ☹️	Príčina ❓	Riešenie 😊
Masážne hlavice sa otáčajú pomaly	Masážne hlavice sú vystavené príliš veľkému zaťaženiu a/alebo tlaku	Znížte zaťaženie a/alebo tlak
Masážne hlavice sa nehýbu	Zariadenie nie je zapojené do elektrickej zásuvky	Zapojte napájací kábel a zapnite zariadenie
	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite zariadenie stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť/Intenzita/Ohrievanie
	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu alebo je zariadenie poškodené	Obráťte sa na svojho predajcu alebo zákaznícky servis

Technické údaje

- Názov produktu: CozyShiatsu
- Rozmery:
 - Chrbát: 70 x 42,5 x 4 cm
 - Sedadlo: 40,5 x 43 x 3 cm
- Hmotnosť: cca 2,6 kg
- Napätie: 220–240 V
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Maximálny príkon: 18 W
- Teplota: 55±5°C
- Automatické vypnutie: 15 minút
- Ochrana proti prehriatiu: áno
- Maximálna povolená hmotnosť: 100 kg



Pokyny na likvidáciu odpadu

Obal je vyrobený výlučne z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať vo vašom miestnom zbernom dvore na ďalšie spracovanie. Lepenku môžete vyhodiť do kontajnera na papier. Obalové fólie je potrebné odovzdať v zbernom a recyklačnom stredisku vo vašej obci.

Keď zariadenie už nepoužívate, zlikvidujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM poskytuje na tento výrobok záruku na akékoľvek materiálové alebo výrobné vady počas dvoch rokov od dátumu zakúpenia, s výnimkou okolností opísaných nižšie.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebením tohto výrobku. Okrem toho sa záruka na tento výrobok LANAFORM nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo neprimeraným používaním, nehodami, používaním neautorizovaného príslušenstva, úpravami výrobku alebo akoukoľvek inou okolnosťou, akéhokoľvek druhu, ktorá je mimo kontroly spoločnosti LANAFORM.

Spoločnosť LANAFORM nemôže byť zodpovedná za žiadny druh náhodných, nepriamych alebo špecifických škôd.

Všetky implicitné záruky týkajúce sa vhodnosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od pôvodného dátumu zakúpenia, pokiaľ je možné predložiť kópiu dokladu o kúpe.

Po prijatí spoločnosť LANAFORM podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš spotrebič a vráti vám ho. Záruka platí iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti LANAFORM. Akýkoľvek pokus o údržbu tohto výrobku osobou inou ako servisným strediskom spoločnosti LANAFORM spôsobí, že táto záruka bude neplatná.

Obsah balení

Zkontrolujte, je-li vnější kartónový obal nepoškozený a jsou-li něm všechny součásti. Před použitím se ujistěte, že zařízení nevykazuje žádné viditelné poškození a že byly odstraněny všechny obalové materiály. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce anebo uvedený zákaznický servis

- 1 masážní a vyhřívaný polštář CozyShiatsu
- 1 návod k použití

Vysvětlení symbolů

Následující symboly se používají v návodu k použití, na obalu a na typovém štítku zařízení:

	VAROVÁNÍ: Varování – riziko poranění anebo ohrožení zdraví
	UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní upozornění týkající se možného poškození zařízení anebo příslušenství, které může představovat potenciální nebezpečí. Nezabrání-li se tomu, může to způsobit menší anebo lehká poranění.
	POZNÁMKA: Informace zvláštního významu
	Přečtěte si pokyny
	Nevpichujte jehlu
	Nevhodné pro kojence (0–3 roky)
	Výrobce
	Tento výrobek splňuje platné evropské a národní směrnice.
	Likvidace v souladu s evropskou směrnicí WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení).
	Oddělte součásti obalu a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.

	Obalový papír je možné recyklovat anebo je vyrobený z recyklovaných materiálů.
	Oddělte jednotlivé části výrobku a obalu a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Pouze k použití v interiéru.
	Zařízení je vybaveno dvojitou ochrannou izolací a splňuje požadavky třídy ochrany II.

Důležité pokyny.

Uložte si je pro příští použití.

⚠ Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny, zejména tyto základní bezpečnostní pokyny.

📷 Fotografie a jiná vyobrazení výrobku v tomto návodu a na obale jsou co nejpřesnější, nemusí však zaručovat přesnou podobnost se skutečným výrobkem.

Správné používání

Toto zařízení je určeno výlučně k masáži zad jednotlivců. Nenahrazuje lékařské ošetření. Nepoužívejte masážní zařízení, nacházíte-li se v některé z následujících situací.

⚠ Upozornění

Masážní zařízení nepoužívejte

- v případě jakéhokoli onemocnění anebo poranění zad (např. hernie disku, otevřená rána),
- nejste-li si jisti, je-li masážní potah na sedadlo vhodný pro vaše zdraví, poraďte se s lékařem,
- před použitím potahu na sedadlo se poraďte s lékařem, zejména
 - trpíte-li vážným onemocněním anebo jste podstoupili operaci v oblasti horní části těla,
 - máte-li implantovaný kardiostimulátor anebo jakýkoli jiný zdravotnický prostředek,
 - trpíte-li trombózou,
 - jste-li diabetik,
 - v případě bolesti neznámého původu,

- během těhotenství,
- během spánku,
- ve vozidle,
- na zvířatech,
- při činnostech, při kterých by nepředvídatelná reakce mohla být nebezpečná,
- po užití látek, které mohou ovlivnit vnímání (např. léky proti bolesti, alkohol, drogy),
- déle než 15 minut (riziko přehřátí); před dalším použitím nechte zařízení vychladnout aspoň 15 minut.

Zařízení je určeno výlučně k použití popsanému v tomto návodu. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného anebo nevhodného používání.

⚠ Upozornění

- Toto zařízení je určeno výlučně k domácímu a soukromému použití. Nesmí být používáno k profesionálním účelům.
- Zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let, jakož i osoby s omezenými fyzickými, smyslovými anebo mentálními schopnostmi anebo bez zkušeností, za předpokladu, že jsou pod dohledem anebo byly řádně poučeny o bezpečném používání a chápou potenciální rizika.
- Děti si nikdy nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Je-li napájecí kabel poškozený, musí být zlikvidován. Je-li trvale připojený k zařízení, je potřebné zlikvidovat celé zařízení.
- Nikdy nekládejte předměty do otvorů anebo pohyblivých částí. Ujistěte se, že všechny pohyblivé komponenty zůstávají vždy volné a bez překážek.
- Nikdy neotevírejte zařízení ani se nepokoušejte spravovat je sami. Mohlo by to poškodit jeho provoz a zrušit platnost záruky.

Bezpečnostní upozornění

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek zranění osob anebo poškození majetku (úraz elektrickým proudem, popálení pokožky, požár). Tyto bezpečnostní pokyny a upozornění slouží nejen k ochraně vašeho zdraví a zdraví ostatních, ale též k ochraně výrobku. Proto dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a odevzdáváte-li zařízení někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tyto pokyny.

- **⚠ Upozornění** Uchovávejte obalový materiál mimo dosahu dětí. Mohly by se udusit.

- **⚠ Upozornění** Tak jako každé elektrické zařízení, i tato masážní jednotka musí být používána šetrně a s opatrností, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Na co si dávat pozor:
 - Používejte pouze s elektrickým napětím uvedeným na obalu.
 - Nepoužívejte zařízení při jeho zjevném poškození.
 - Nepoužívejte je během bouře.
- V případě poruchy anebo nesprávné funkce zařízení okamžitě vypněte a odpojte je od napájení. Při odpojování netahejte za napájecí kabel ani za samotné zařízení. Zařízení nikdy nedržte ani nepřenášejte za napájecí kabel. Kabel držte dál od horkých povrchů. Vyhněte se skřípnutí, ohnutí anebo zkroutení kabelu. Nikdy nevkládejte jehly ani ostré předměty do kabelu anebo potahu sedadla.
- Ujistěte se, že masážní polštář a jeho napájecí kabel nepřijdou do kontaktu s vodou, párou anebo jinými kapalinami.
- Proto používejte zařízení
 - pouze v interiéru, v suchých podmínkách – nikdy v koupelně, sauně ani v žádném jiném vlhkém prostředí,
 - pouze suchýma rukama.
- Spadne-li masážní polštář do vody, nikdy jej nevybírejte bez toho, abyste je nejdříve odpojili ze zásuvky.
- Neupustíte masážní polštář a nevystavujte jej silným nárazům.
- Toto zařízení smí spravovat pouze kvalifikovaný technik. Jakákoli nesprávná oprava může představovat vážné riziko pro uživatele. V případě potřeby opravy kontaktujte zákaznický servis anebo svého prodejce.
- Zipy na opěradle a sedadle se nesmí otevírat; jsou určeny výhradně k opravářským účelům.
- **⚠** Jakékoli nesprávné anebo nevhodné používání tohoto výrobku může vést k nebezpečí požáru.
- Proto nikdy nepoužívejte masážní polštář
 - pod dekou anebo jinou látkou,
 - v blízkosti hořlavých látek.
- Zařízení musí být po každém použití a před čištěním vypnuto a odpojeno od napájení.
- Používejte zařízení pouze ve svislé poloze opřené o opěradlo anebo jinou pevnou podložku; nikdy je nekladte na podlahu.
- Neopírejte se celou váhou o masážní část potahu sedadla (či už sedíte, ležíte anebo stojíte) a nekladte na zařízení žádné předměty.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Prezentace

Děkujeme, že jste si vybrali elektrický masážní a vyhřívaný polštář **CozyShiatsu** od společnosti **LANAFORM**. Byl speciálně navržen pro vaše pohodlí a poskytuje hluboký a uklidňující relaxační zážitek. Nastavitelné úrovně intenzity vyhřívání a masáže se snadno přizpůsobí vašim potřebám pomocí jediného ovládacího tlačítka. **CozyShiatsu** se svými měkkými gelovými masážními hlaviciemi zaručuje optimální komfort.

Popis produktu 1

Příslušná schémata najdete na straně 3.

- 01** Opěradlo masážního a vyhřívacího sedadla
- 02** Otočné gelové masážní hlavice Shiatsu
- 03** Vyhřívací zóna
- 04** Povrch sedadla
- 05** Upevňovací popruhy
- 06** LED indikátory zobrazující úrovně intenzity masáže
- 07** Tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Intenzita / Vyhřívání
- 08** LED indikátor signalizující, je-li funkce vyhřívání aktivována
- 09** Napájecí konektor

Bezpečnost

Upozornění

Tento masážní a vyhřívací potah na sedadlo je vybaven bezpečnostním systémem. Elektronický senzor zabráňuje přehřátí vyhřívací zóny na celé její ploše tím, že v případě poruchy automaticky vypne zařízení.

Maximální doba provozu a automatické vypnutí::

Hned po zapnutí potahu sedadla se aktivuje funkce automatického vypnutí, která je nastavená na 15 minut.

Masážní zařízení používejte maximálně 15 minut, poté je nechte vychladnout. Delší používání může svaly nadměrně stimulovat a způsobit napětí namísto relaxace. Masáž můžete kdykoli zastavit stlačením tlačítka ON / OFF / Intenzita / Ohřívání.

Návod k použití

Umístění vyhřívaného potahu na sedadlo Shiatsu

- 01** Masážní polštář položte svle na vhodnou židli, která má sedák i opěrku zad (židle, pohovka anebo podobný nábytek). Ujistěte se, že sedák i opěrka zad leží rovně na celé ploše židle.
- 02** K upevnění masážního polštáře použijte suché zipy.
- 03** Umístěte napájecí kabel tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí. Zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky.

Spuštění zařízení

⚠ Upozornění

Nevkládejte žádnou část těla, zejména prsty, mezi rotující masážní hlavice nebo jejich podpěry uvnitř zařízení.

① Nejprve jemně přitiskněte záda na Masážní polštář Shiatsu. Poté opatrně zkontrolujte, je-li pro vás masážní poloha pohodlná, a postupně přeneste svoji váhu na masážní a vyhřívaný potah sedadla. Masáž by měla být vždy příjemná a relaxační. Stane-li se masáž bolestivou nebo nepohodlnou, zastavte ji anebo upravte svoji polohu anebo vyvíjený tlak.

- 01 Připojení zařízení: Zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky. Při prvním použití se masážní hlavice automaticky přesunou do správné počáteční polohy v zadní části sedadla.
- 02 Správné umístění: Sedněte si pohodlně a vzpřímeně na potah sedadla. Ujistěte se, že sedíte uprostřed, aby se masážní hlavice mohly pohybovat snadno a vpravo od vaší páteře.
- 03 Spuštění zařízení: Stlače a podržte tlačítko Zapnout / Vypnout / Intenzita / Ohřívání po dobu 5 sekund. LED indikátor intenzity svítí zelenou barvou. Rotující masážní hlavice se pomalu pohybují dolů z počátečné polohy v horní části potahu sedadla a potom pokračují v pohybe nahoru a dolů podél zad.
- 04 Nastavení úrovně intenzity: Zařízení má dvě úrovně intenzity. Pro přepínání mezi nimi stlače a podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Intenzita / Ohřívání na 2 sekundy během masáže.
 - Zelená LED = nízká intenzita
 - Modrá LED = vysoká intenzita
- 05 Aktivace funkce vyhřívání: Stlače a podržte tlačítko Zapnout / Vypnout / Intenzita / Vyhřívání po dobu 1 sekundy, abyste aktivovali funkci vyhřívání. LED dioda pro funkci vyhřívání se rozsvítí červenou barvou. Chcete-li funkci vyhřívání deaktivovat, zopakujte stejný krok. Červená LED dioda zhasne.
- 06 Vypnutí zařízení: Pro vypnutí zařízení stlače a podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí / Intenzita / Ohřívání po dobu 5 sekund. LED indikátor intenzity bliká zelenou barvou. Masážní hlavice se pomalu vrátí do své počátečné polohy. V závislosti od jejich polohy v době vypnutí to může trvat několik sekund. Počkejte, pokud se masážní hlavice nevrátí do své počátečné polohy, a až potom odpojte napájecí kabel. Nikdy neodpojujte masážní a vyhřívaný potah sedadla během provozu. Vždy vypněte zařízení a počkejte, pokuse se masážní hlavice nevrátí do své počátečné polohy, a až potom je odpojte.

Čištění a údržba

⚠ Upozornění

- Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte je vychladnout.
- Malé skvrny možno odstranit měkkým, vlhkým hadříkem a v případě potřeby trochou jemného tekutého čistícího prostředku. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla.
- Zařízení používejte jen tehdy, když je úplně suché.
- Čistěte Masážní polštář přísně dle pokynů. Za žádných okolností nesmí do zařízení vniknout tekutina.
- Zipy nejsou určeny ke snímání a praní potahu sedadla. Slouží výhradně k výrobním a opravárenským účelům.

Skladování

Nepoužíváte-li masážní a vyhřívaný potah sedadla delší dobu, je doporučeno uložit jej do původního obalu, uchovávat na suchém místě a vyhnout se kladení jakýchkoli předmětů na něj.



Řešení problémů

Problém ☹	Příčina ?	Řešení ☺
Masážní hlavice se otáčejí pomalu	Masážní hlavice jsou vystaveny příliš velkému zatížení a/nebo tlaku	Snižte zatížení a/nebo tlak
Masážní hlavice se nehýbou	Zařízení není zapojeno do elektrické zásuvky	Zapojte napájecí kabel a zapněte zařízení
	Zařízení není zapnuto	Zapněte zařízení stlačením tlačítka Zapnout / Vypnout / Intenzita / Ohřívání
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí nebo je zařízení poškozené	Obratťe se na svého prodejce nebo zákaznický servis

Technické údaje

- Technické údaje
- Název produktu: CozyShiatsu
- Rozměry:
 - Záda: 70 × 42,5 × 4 cm
 - Sedadlo: 40,5 × 43 × 3 cm
- Hmotnost: cca 2,6 kg
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Maximální příkon: 18 W
- Teplota: 55±5 °C
- Automatické vypnutí: 15 minut
- Ochrana proti přehřátí: ano
- Maximální povolená hmotnost: 100 kg



Pokyny k likvidaci odpadu

Obal je vyrobený výlučně z ekologických materiálů, které můžete odevzdat ve vašem místním sběrném dvoře k dalšímu zpracování. Lepenku můžete vyhodit do kontejneru na papír. Obalové fólie je potřebné odevzdat ve sběrném a recyklačním středisku ve vaší obci.

Když zařízení už nepoužíváte, zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s právními předpisy.

Omezená záruka

Společnost LANAFORM poskytuje na tento výrobek záruku na jakékoli materiálové nebo výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení, s výjimkou okolností opsaných níže.

Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na poškození způsobená běžným opotřebením tohoto výrobku. Kromě toho se záruka na tento výrobek LANAFORM nevztahuje na poškození způsobená nesprávným, nevhodným anebo nepřiměřeným používáním, nehodami, používáním neautorizovaného příslušenství, úpravami výrobku anebo jakoukoli jinou okolností, jakéhokoli druhu, která je mimo kontroly společnosti LANAFORM.

Společnost LANAFORM nemůže být odpovědná za žádný druh náhodných, nepřímých anebo specifických škod.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti výrobku jsou omezeny na období dvou let od původního data zakoupení, pokud je možné předložit kopii dokladu o koupi.

Po přijetí společnost LANAFORM dle vlastního uvážení opraví anebo vymění váš spotřebič a vrátí vám jej. Záruka platí pouze prostřednictvím servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto výrobku osobou jinou než servisním střediskem společnosti LANAFORM způsobí, že tato záruka bude neplatná.



LANAFORM

COZYSHIATSU

LA110319 / LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER

LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS

+32 4 360 92 91

RUE DE LA LÉGENDE, 55

INFO@LANAFORM.COM

4141 LOUVEIGNÉ, BELGIUM

WWW.LANAFORM.COM

DOVOZ A DISTRIBÚCIA V SR / DOVOZ A DISTRIBUCE V ČR:

INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava

infolinka: 02/40 200 400