

VITAMMY®

babycinno

váha pre novorodencov, dojčatá, deti a rodičov

ODNÍMATEĽNÁ VÁŽIACA PLOCHA PRE DOJČATÁ

SBS-30322



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

⚠ Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.


ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali našu digitálnu váhu pre dojčatá. Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a upozornenia.

Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom, aby ste predišli nehodám a/alebo poškodeniu výrobku pri jeho používaní.

Tento domáci spotrebič je užitočný pre všetkých členov rodiny. Je vhodný na váženie novorodencov, dojčiat, detí aj dospelých.

POPIS ZARIADENIA

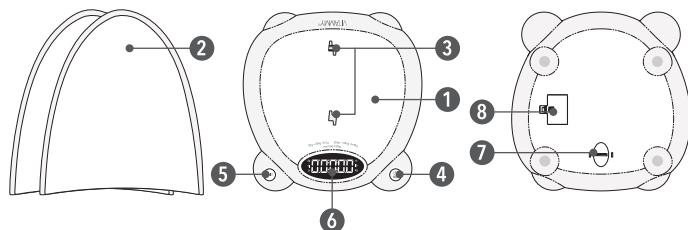

1. Váha
2. Nástavec pre novorodencov a dojčatá
3. Zdiecky na pripevnenie nástavca
4. Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť / Tare


5. Tlačidlo na zmenu jednotiek UNIT
6. LED obrazovka
7. Ochrana misky váhy
8. Priestor na batérie

POUŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

⚠ Pred prvým použitím vložte batérie.



1. Otvorte kryt batérie a vyberte izolátor z priehradky na batérie.
2. Vložte 3 batérie AAA (1,5 V) v súlade s vyznačenou polaritou.
3. Zatvorte kryt batérie.

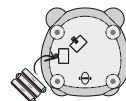

SCALE

⚠ Pre novorodencia alebo dojča použite nástavec na váženie.


1. Umiestnite časti nástavca do otvorov.
2. Časti nástavca položte paralelne k sebe a potom každú časť posuňte opačným smerom, aby sa spojili do jednej plochy.
3. Zaisťte nástavec proti vypadnutiu stlačením ochrany na spodnej strane váhy.

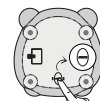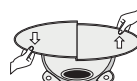

4. Keď nástavec nepotrebuje, odblokujte ochranu nástavca, odsuňte jeho časti od seba a potom nástavec zložte z váhy. Uložte na suchom mieste.

VÁŽENIE DOJČAT

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a vodorovný povrch.
- ⚠ Váhu neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú podložky alebo koberce, pretože to môže ovplyvniť výsledok váženia.
2. Váhu zapnite tlačidlom Zapnúť / Vypnúť / Tara.
3. Keď sa na obrazovke objavia nuly a vážiaca jednotka, môže sa začať kontrolné váženie.
4. Ak chcete zmeniť jednotku hmotnosti, (kg / lb / st) stlačte tlačidlo UNIT
5. Ak chcete otočiť obsah obrazovky, stlačte a podržte tlačidlo UNIT na približne 2 sekundy.
6. **Položte dieťa na váhu. Výsledok sa zobrazí na displeji. Ak nechcete dieťa položiť priamo na váhu, najprv na váhu položte uterák, stlačte tlačidlo Zapnúť / Vypnúť / Tara a po vynulovaní položte dieťa na váhu.**

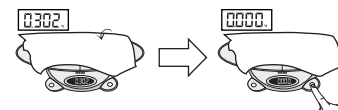

7. Vypnite váhu stlačením tlačidla On / Off / Tara alebo počkajte, kým sa váha sama vypne asi po 60 sekundách.

- △ Ak chcete po odstránení dieťaťa z váhy vykonať ďalšie meranie, pred ďalším meraním váhu vynulujte stlačením tlačidla On / Off / Tara.

VÁŽENIE VÄČŠÍCH DETÍ A DOSPELÝCH

1. Položte váhu na tvrdý, rovný a vodorovný povrch.

- △ Váhu neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú podložky alebo koberce, pretože to môže ovplyvniť výsledok.

2. Váhu zapnite tlačidlom ON / OFF / Tara.

3. Keď sa na obrazovke objavia nuly a vážiaca jednotka, môže sa začať kontrolné váženie.

4. Ak chcete zmeniť jednotku hmotnosti, (kg / lb / st) stlačte tlačidlo UNIT.

5. Ak chcete otočiť obrazovku displeja, stlačte a podržte tlačidlo UNIT asi 2 sekundy.

6. Postavte sa na váhu a prečítajte si výsledky na displeji.

7. Vypnite váhu stlačením tlačidla ON / OFF / Tara alebo počkajte, kým sa váha sama vypne po 60 sekundách.




FUNKCIA AUTOLOCK

Keď sa dieťa nepokojne správa a pohybuje, váha sa automaticky stabilizuje a výsledok sa zobrazí po trojitom zablikaní číslice na displeji.

TARE

Váhou VITAMMYBABYCINNO je možné vážiť viac ako jedno dieťa.

Pred ďalším meraním odstráňte dieťa z váhy, stlačte tlačidlo ON / OFF / Tara, a po vynulovaní položte ďalšie dieťa.

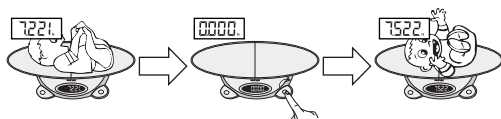

ZMENA JEDNOTKY HMOTNOSTI

Ak chcete zmeniť jednotku hmotnosti (kg / lb / st), stlačte tlačidlo UNIT



INDIKÁTOR PRESAHUJÚCI LIMIT

Ak váha dieťaťa prekročí maximum pre hmotnosť (120 kg), na obrazovke sa zobrazí „0-Ld“.



NÍZKY STAV BATÉRIE Váha je indikovaná stavom vybitia batérie, ktorý zobrazuje na displeji symbol „Lo“.



△ UPOZORNENIA

△ Pri používaní položte váhu na rovný, suchý, stabilný a tvrdý povrch.

△ Tento spotrebič používajte doma podľa určenia.

△ Váhu nepreťažujte, maximálne zaťaženie je 120 kg.

△ Vyhnite sa otrasom alebo nárazom na vašu váhu.

△ Neponárajte váhu do vody.

△ Optimálna teplota pre manipuláciu a skladovanie je od 5 do 40 °C.

SPECIFIKÁCIA

⚠ Akékoľvek úpravy na zariadení nie sú povolené

MODEL	SBS-30322
POUŽITÝ MATERIÁL	ABS
TYP ZOBRAZENIA	LED 90 × 26 mm
ROZMERY	650 × 320 × 88 mm
OBSAH BALENIA	Váha, manuál, 3 batérie AAA 1,5V
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA, SKLADOVANIE DOPRAVA	5 - 40 °C
SNÍMAČE	4 presné tenzometre
MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ	120 kg
PRESNOSŤ	Pri hmotnosti <20 kg d = 5 g, v rozsahu hmotnosti 20 ~ 120 kg d = 50 g
NAPÁJANIE	3 batérie typu AAA 1,5V

ZÁRUKA

ZARIADENIE: VITAMMY babycinno (model SBS-30322)

RUČITEĽ: MLongauer, s.r.o. Farská 12, 949 01, Nitra

TECHNICKÁ PODPORA: +421940404831

E-MAIL: reklamacie@mlongauer.sk

ZÁRUKA: Garant ubezpečuje kupujúceho, že prístroj VITAMMY, na ktorý sa vzťahuje táto záruka, bol navrhnutý a vyrobený v súlade s vysokými štandardmi kvality a dobrej kvality prístroja, bez materiálových alebo výrobných chýb, ktoré by mohli brániť jeho správnej funkcii.

V prípade akýchkoľvek závad, poškodení a odhalených chýb počas trvania tejto záruky, garant bezplatne opraví alebo vymení nové zariadenie v lehote, nepresahujúcej 30 dní.

TYP ZÁRUKY: Táto záruka predpokladá, že predmetné zariadenie bude kupujúcemu dodané na náklady servisu, bezplatne opravené a bezplatne vrátené kupujúcemu.

ZÁRUČNÁ DOBA: 24 mesiacov na zariadenie.

Bez záruky Časti a príslušenstvo podliehajúce bežnému používaniu: batérie.

ZÁRUČNÁ LEHOTA: Záruka je platná dňom nákupu potvrdeným dokladom o kúpe, ktorý je potrebné priložiť k záručnému listu.

OBĽASŤ ZÁRUKY: Táto záruka sa vzťahuje na územie SR.

Spustenie reklamačného konania. V rámci reklamačného konania je potrebné zaslať reklamované zariadenie na adresu servisu s priložením tohto záručného listu a dokladu o kúpe.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY: Pre zachovanie platnosti záruky je potrebné spolu s reklamovaným zariadením uviesť na meno zakúpeného zariadenia aj tento záručný list (správne vyplnený a podpísaný) a pokladničný doklad s dátumom nákupu.

OBMEDZENIA A VYLÚČENIA ZÁRUK:

- Záruka neposkytuje žiadnu kompenzáciu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo zariadeniam, keď zariadenie nefunguje alebo je v servise.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia a škody spôsobené:
 - nevhodným konaním (v rozpore s určeným použitím) alebo konaním spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na použitie
 - nesprávnym skladovaním a údržbou (napr. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov) a používanie nevhodného spotrebného materiálu
 - zásahmi neoprávneným servisom, neoprávnenými opravami, zmenami a konštrukčnými zmenami
 - vonkajšie príčiny (atmosférické javy, nedostatočné napájanie atď.)
- Záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobu v dôsledku zmien vlastností (zhoršenie kvality) komponentov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.
- Záručná oprava a úkony súvisiace s údržbou a čistením zariadenia sú popísané v Návode na obsluhu.

Pečiatka a podpis
predajcu zákazníka

Dátum

Podpis

LIKVIDÁCIA NEPOTREBNÉHO ZARIADENIA DOMÁCIMI UŽÍVATEĽMI EURÓPSKEJ ÚNIE



Prítomnosť tohto symbolu na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt nemožno likvidovať ako domáci odpad. Preto nesiete zodpovednosť za likvidáciu nepotrebných zariadení a ste povinní ich odovzdať do autorizovaného recyklačného miesta pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia. Triedenie, likvidácia a recyklácia nepotrebných zariadení pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, aby sa recyklácia vykonávala v súlade so zásadami rešpektovania zdravia ľudí a životného prostredia. Ak chcete získať ďalšie informácie o zberných miestach pre vaše odpadové zariadenia, obráťte sa na miestne úrady alebo miestnu službu likvidácie domového odpadu.



Výrobok má certifikát CE

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

VÝROBCA:

 AEAMAXXCO., LTD

4F, BuildingA, DonghustrialPark, No61, DongpuErRoad, Tianhe District, Guangzhou,
People's Republic of China

DISTRIBÚTOR:

MLongauer, s.r.o., Frská 12, 949 01, Nitra

Prevádzka:

Baby's, Hlavná 43, 951 53 Babindol

kontakt: +421940404831

mail: reklamacie@mlongauer.sk

Vyrobené v Číne / Made inChina

Verzia manuálu: 01.02 / 26.04.2021